


Koppelsysteem – belucht

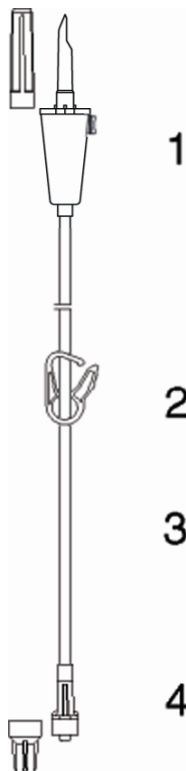

1. Beluchte kunststofnaald met geïntegreerd hydrofoob filter en terugslagventiel dat het nat worden en hierdoor niet meer functioneren van het filter voorkomt. Het groene afsluitkapje is standaard gesloten.
De speciale vorm vereenvoudigt het aanprikken van infuuspooten en garandeert een veilige connectie.
De beschermkap waarborgt de inwendige steriliteit.
2. Open/dicht klem.
3. Transparante flexibele PVC infuusslang (TOTM) i.d. 3.0 mm.
4. Luer-lock aansluiting voor een gemakkelijke en veilige koppeling. Inclusief FlowStop beschermkap die de inwendige steriliteit waarborgt en voorkomt lekkage van vloeistof tijdens vullen van het toedieningssysteem door geïntegreerd hydrofoob filter.

<u>Bestelnr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Verpakking</u>
76.4432	Koppelsysteem, belucht, open/dicht klem, FlowStop. Lengte ± 40 cm.	80 stuks
76.4439	Koppelsysteem, belucht, open/dicht klem, FlowStop. Lengte ± 60 cm.	80 stuks